

InView™ Standard férfi külső vizeletkondom

Általános információk

Az öntapadó férfi külső katéter átlátszó szilikon anyagból készült. A külső katéterek jó alternatívát jelentenek az állandó katéterekkel, pelenkákkal vagy más nedvszívó termékekkel szemben.*

Öt különböző méretben kapható, a csomagolás pedig színkódolt a könnyű azonosítás érdekében.

Small	25 mm	Zöld
Medium	29 mm	Lila
Intermediate	32 mm	Barna
Large	36 mm	Kék
Extra Large	41 mm	Narancssárga

A megfelelő méret kiválasztása és előkészítés






- Használja a Hollister színkódolt méretező sablonját¹ a megfelelő méret meghatározásához.
- A mérőt a pénisz törzsének legszélesebb pontja alá helyezze (nem a makk alá).
- Szükség esetén vágja rövidebbre a szeméremszőrzetet.
- Mossa meg a péniszt enyhe szappannal és meleg vízzel, majd alaposan szárítsa meg.

Használati útmutató

1. Nyissa ki a csomagot a perforáció mentén, és vegye ki a katétert.
2. Helyezze a feltekert végét a pénisz végére úgy, hogy kis hely maradjon a makk és a katéter csúcsa között.
3. Lassan görgesse le a katétert a péniszre, a lehető legkevesebb ráncsal.
4. Finoman nyomja rá a bőrre a megfelelő tapadás érdekében. Ne próbálja újrapozicionálni a felhelyezett katétert. Lehetőleg ne maradjon feltekert „gallér” a pénisz tövénél.

Eltávolítás és hulladékkezelés

5. Csatlakoztassa le a katétert a vizeletgyűjtő rendszerről. Finoman görgesse előre és húzza le a péniszről. Szükség esetén helyezzen rá meleg, nedves borogatást a ragasztó fellazításához. A terméket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

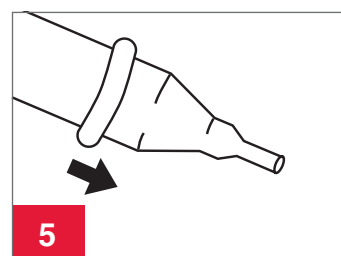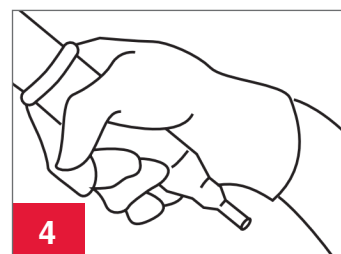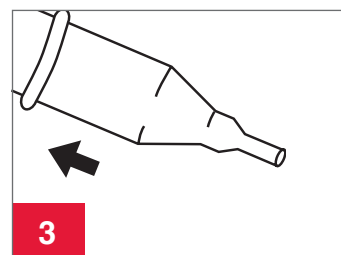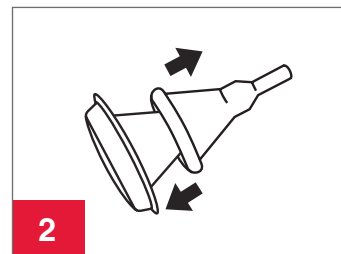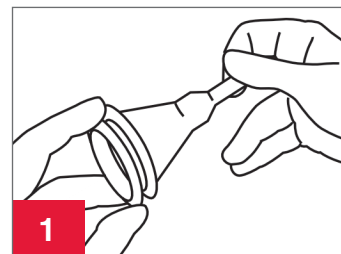

*Nem természetes gumilátex felhasználásával készült.

¹A digitális méretező sablon kinyomatható a hartmannwebshop.hu oldalon, az adott termék adatlapjáról



Gyakran ismételt kérdések

Mennyi ideig marad fent a katéter?	A viselési időt több tényező befolyásolja, például: a felhelyezés módja, az egyéni anatómiai adottságok, a bőr állapota. A megfelelő higiénia érdekében a katétert naponta cserélni kell.
Fontos a megfelelő méret kiválasztása?	Igen. Ha a páciens két méret között van, a nagyobb méret választása javasolt. A felesleges szilikonanyagot a pénisztörzsön össze lehet nyomni, hogy a vizelet ne szivárogon a katéter alá.
Hogyan tisztítsam a külső katéterhez használt ágy melletti vizeletgyűjtő zsákot vagy lábszárszákat?	A használatok között ürítse ki és öblítse ki a zsákot langyos vízzel, vagy tisztítsa a gyártó utasításai, illetve az egészségügyi szakember ajánlásai szerint. Akassza fel száradni hőforrásoktól távol. Szükség esetén a zsák és a cső külső felületét nedves ruhával törölje át. A csatlakozót minden használat előtt alkoholos törlőkendővel tisztítsa meg. A zsákot látható sérülés vagy elszíneződés esetén ki kell cserélni.
Mi a legjobb módja a külső katéter eltávolításának? (5. ábra)	A katéterhüvelyt finoman görgesse előre, majd húzza le a péniszről. Bizonyos esetekben a katéterre körülbelül 30 másodpercig helyezett meleg, nedves mosdókesztyű vagy törlőkendő segíthet a ragasztó tapadásának csökkentésében, ezáltal megkönnyítve az eltávolítást. Ragasztóeltávolító törlőkendő használata szintén hasznos lehet.
Használható külső katéter körülmetéletlen péniszen?	Igen. A katétert a fityma természetes helyzetében kell felhelyezni.

Javallatok és rendeltetésszerű használat

A termék olyan segédeszköz, amely a vizeletet a péniszről hosszabbító csövön keresztül vizeletgyűjtő zsákba vezeti felnyitott, vizeletinkontinenciában szenvedő férfiak számára.

FIGYELMEZTETÉSEK

Az egyszer használatos termék újrafelhasználása kockázatot jelenthet a felhasználó számára, például nem megfelelő tapadást, szivárgást vagy bőrirritációt okozhat.

Övintézkedések

Ne használja irritált vagy sérült bőrfelületen.

Allergiás reakció esetén ne használja a terméket.

Gondoskodjon a megfelelő méret kiválasztásáról és illeszkedéséről az utasításoknak megfelelően. Ha a katéterhüvely mérete nem megfelelő, vagy szivárgás lép fel, bőrkárosodás (pl. irritáció, hámlás, kiütés vagy bőrpír) alakulhat ki, ami csökkentheti a viselési időt.

Duzzanat, zsibbadás, kellemetlen érzés, fájdalom, elszíneződés vagy bármilyen rendellenes elváltozás esetén a terméket az előírások szerint távolítsa el.

Megjegyzések

A megfelelő higiénia érdekében a katéterhüvelyt naponta cserélje.

A megfelelő tapadás biztosítása érdekében a terméket tiszta, száraz és ép bőrfelületre helyezze fel.

Ne használjon testpolót, hintópont vagy kenőcsöt a felhelyezés helyén, mivel ezek ronthatják a termék tapadását.

A termékkel vagy esetleges bőrirritációval kapcsolatban forduljon egészségügyi szakemberhez.

A Hollister, a Hollister logó és az InView a Hollister Incorporated védjegyei.

© 2021 Hollister Incorporated

911229-0121 US-01326

Lezárás dátuma: 2026.06.23.



hartmannwebshop.hu

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
hartmann.hu
hartmannakademia.hu



A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!